



# HYDRO PACKER

HOT PACK UNIT



**NIHON MEDIX**




# HYDRO PACKER

## HOT PACK UNIT

### 耐久性にすぐれ、 衛生的なオールステンレス製。

ひろびろとしたステンレス槽には、中サイズのホットパックが約20枚収納可能 (PH-H2620タイプ)。患者さんが多くても、1台で効率よく湿性温熱療法が行えます。また、内槽だけでなく外装もステンレス製なので錆びにくく衛生的です。

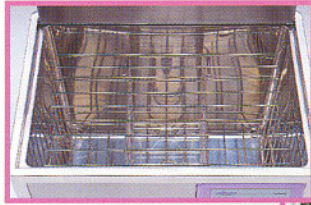

PH-H2620タイプ

ホットパック中  
サイズが  
約20枚  
収納可能

### さらに省エネ! フタも軽くなって、開け閉めスムーズ。

消費電力が従来より30%もダウン (当社比)。フタも従来より25%軽量化 (当社比)。毎日使うことを考え、使う方の負担をぐんと少なくしました。



前面の扉を開けると排水バルブがあるので、めんどろな排水も簡単に行えます。

### ハンドルを内側に向けられるので、 狭いスペースにも設置OK。

フタのハンドルが、左右に使いやすい側へ取りつけられ、さらに外側にも内側にも向けられるようになりました。内側に向ければジャマにならず、狭いスペースにも設置できます。




PH-H2610タイプ

### 休診後の診療再開に合わせてセット。 便利なOTSタイマー搭載。

1週間の治療スケジュールに合わせ、自動運転をプログラムできる週間タイマーを搭載。さらに、カレンダー機能で自動運転するOTS (On Time Start) タイマーを、世界に先がけて内蔵しました。たとえば長期の休診の場合でもタイマーをセットしておけば、診療再開の日時に自動的にスイッチオン。治療前には適温となっているので、加温待ちの時間がなく、すぐに治療を行うことができます。


## ホットパックは、大・中・小合わせて6タイプ。治療部位に合わせてお選びください。

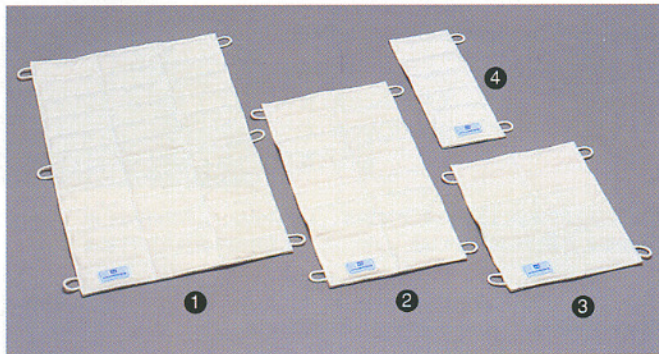


熱保有度の高い物質を袋 (ジーン布) に詰めているので、すぐれた保温力をもっています。取扱いが簡単なうえ、使用目的や部位によってさまざまな大きさ、形状をお選びいただけます。

	型式	サイズ (mm)	品目番号
①	PE-25A-LL (特大)	380×634	12B2X00017000001
②	PE-25A-L (大)	258×500	12B2X00017000002
③	PE-25A-M (中) (標準タイプ)	258×328	12B2X00017000003
④	PE-25A-S (小)	130×328	12B2X00017000004
⑤	PE-25B-1 (ネックパック)	170×586	12B2X00017000005
⑥	PE-25C-1 (ショルダーパック)	540×445	12B2X00017000006

※専用カバー (黄色のカバー) は、オプション品です。

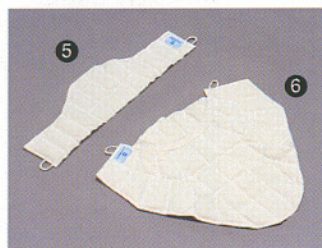


▲ショルダーパック

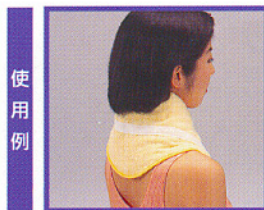

使用例

●PE-25B-1 (ネックパック)

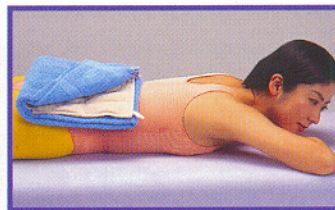

●PE-25A-M (中)



●PE-25C-1 (ショルダーパック)



オール  
ステンレス!

# 全機種にOTSタイマー内蔵。 使いやすさに磨きかけた、 ハイドロパッカーシリーズ。

ステンレス槽内の温度を内蔵CPUで制御する、日本メディックスのホットパック加温装置“ハイドロパッカー”。温度設定の正確さとすぐれた機能性、安全性が、治療に携わる方々から高い評価をいただいています。



世界初のOTS (On Time Start) タイマーも搭載して、さらに使いやすさがアップ。また、内槽だけでなく外装にも、耐久性にすぐれたステンレスを採用しました。



PH-H2620タイプ

## 見やすい!使いやすい!上向きセットの ワンタッチ操作表示パネル。

ワンタッチ操作の表示パネルは、25°の角度で上向きに設計。治療中でも確認しやすく、自然な視線・姿勢で操作・設定ができます。

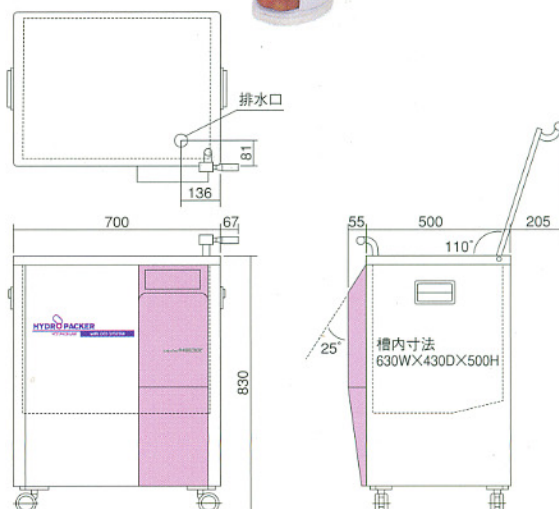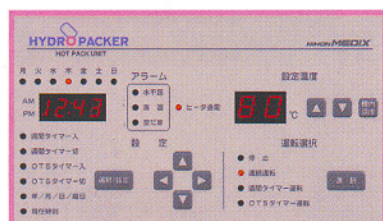

PH-H2620タイプ



バリエーションは、3タイプ。  
治療用途・スペースによりお選びください。

約**12**枚 収納タイプ  
ホットパック中サイズ



PH-H2610

約**20**枚 収納タイプ  
ホットパック中サイズ



PH-H2620

約**32**枚 収納タイプ  
ホットパック中サイズ



PH-H2630

■仕様■

販売名	ハイドロパッカー 小型	ハイドロパッカー 中型	ハイドロパッカー 大型
型式	PH-H2610	PH-H2620	PH-H2630
一般的名称		湿式ホットパック装置	
クラス分類		一般医療機器	
定格電源		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	1,100VA		1,400VA
タイマー		週間タイマー、OTSタイマー	
設定温度		50~90℃	
材質		ステンレスSUS304 (外装)、ステンレスSUS316 (内槽)	
寸法 (mm)	500W×555D×830H	700W×555D×830H	900W×555D×830H
槽内寸法 (mm)	430W×430D×500H	630W×430D×500H	830W×430D×500H
質量	44kg	53kg	63kg
パック収納容量 (中)	12枚	20枚	32枚
安全装置		漏電ブレーカ、サーモスタット、回路ヒューズ、空炊き防止装置	
電撃保護		クラス I 機器	
品目番号	12B2X00017000007	12B2X00017000008	12B2X00017000009
耐用期間		8年	
使用環境		周囲温度10~40℃、相対湿度30~75%、気圧700~1060hpa	



PH-H26PW パック用ワゴン

ハイドロパッカーと併用して、加温したホットパックをワゴン上面でセットし、準備するために使用します。中段のバスタオル入れには、つねに乾燥したタオルを用意しておくことができます。病室間を移動しながら使うのに便利です。

■仕様■

材質:ステンレススチール  
寸法:769W×385L×770H (mm)  
質量:11kg



安全に関する  
ご注意

- ご使用前に、「添付文書」、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。●この機器には、電気工事が必要な場合があります。

※「ハイドロパッカー」「ショルダーパック」は日本メディックスの登録商標です。  
※仕様・外観等は'07年10月現在のものと断わりなく変更する場合がありますがご了承ください。

株式会社日本メディックスは品質システムの  
国際規格ISO13485の認証を取得しています。

取扱店

株式会社日本メディックス